

臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

平成28年9月

A-16-19

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度下記検査項目におきまして、検査内容の変更をさせて頂きたくご案内致します。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成28年10月11日(火) ご依頼分より

◆ 変更内容

2016-17年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	現
p.17 p.30	18160	抗サイログロブリン抗体	検査法	CLIA	ECLIA
			基準値	4.11未満IU/mL	28未満IU/mL
			所要日数	2日	3~6日
p.17 p.30	18180	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体)	検査法	CLIA	ECLIA
			基準値	5.61未満IU/mL	16未満IU/mL
			所要日数	2日	3~6日
p.36	20280	CA15-3	検査法	CLIA	CLEIA
			基準値	31.3以下U/mL	25.0以下U/mL
			所要日数	2日	3~6日
p.37	20430	シフラ (サイトケチン19フラグメント)	検査法	CLIA	ECLIA
			所要日数	2日	3~5日

◆ 新旧の相関

抗サイログロブリン抗体

n=54		新法		
		陽性	陰性	計
旧法	陽性	16	0	16
	陰性	4	34	38
	計	20	34	54


一致率：92.6%

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体


n=58		新法		
		陽性	陰性	計
旧法	陽性	14	1	15
	陰性	2	41	43
	計	16	42	58

一致率：94.8%

CA15-3

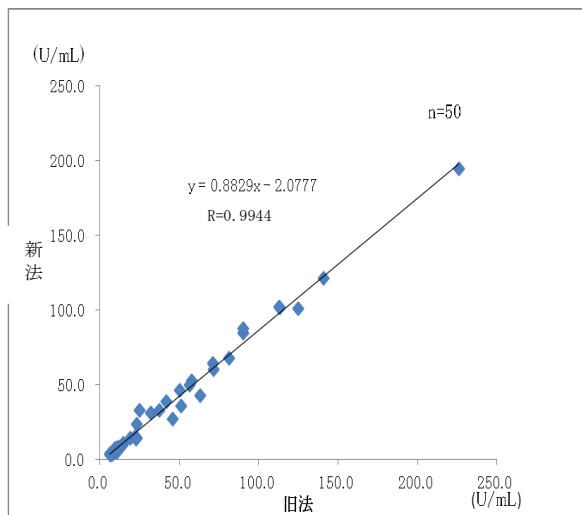

シフラ (サイトケラチン19フラグメント)

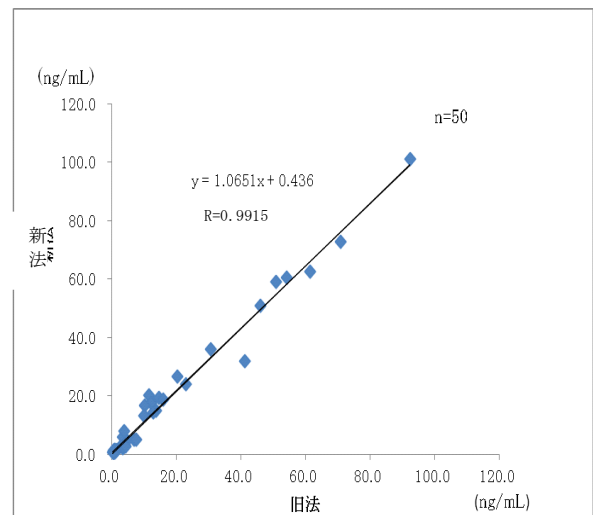

◆ 参考文献

峯尾 真澄：抗サイログロブリン抗体測定キット「アーキテクト・Tg抗体」ならびに抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体測定キット「アーキテクト・TPO抗体」の検討：医学と薬学 Vol.68 No.6 2012